


Feelo.

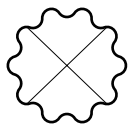

KIDS

DĚTSKÝ SONICKÝ ZUBNÍ KARTÁČEK

3-6 LET




PRVKY SETU

- 1 rukojeť kartáčku
- 3 vyměnitelné hlavice / pro děti 3-6 let
- 1 AAA baterie
- Návod k obsluze

VLASTNOSTI A FUNKCE KARTÁČKU

- Kartáček vytváří 24 tisíc vibrací za minutu, poskytující šetrné a účinné čištění a dásně.
- Barevné LED osvětlení hlavičky zubního kartáčku vybízí aby si děti čistily zuby.
- Ergonomická rukojeť s protiskluzovou úpravou povlak vyrobený z materiálu ABS
- Časovač – 2minutový automatický časovač, každých 30 sekund připomínající pohyb do dalšího kvadrantu úst. Kartáček se vypne automaticky po dvou minutách.
- Napájení: 1 baterie AAA. Průměrná provozní doba baterie je přibližně 150 dní při používání zubního kartáčku 2krát denně po dobu až 2 minut každý den.
- Třída odolnosti proti vodě IPX7. To znamená, že kartáček je odolný k náhodnému ponoření do vody až do hloubky 1 metru po dobu až 30 minut.
- Vyměnitelná hlavice zubního kartáčku je šetrná k dásním díky materiálu DuPont štětín.

PODROBNÝ NÁVOD K OBSLUZE

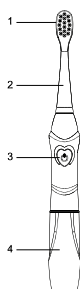

POPIS KARTÁČKU

1. Hlavice kartáčku
2. LED osvětlení
3. On/Off Vypínač
4. Kryt baterie

POUŽITÍ KARTÁČKU

- Nasadte hlavici na přídržný kolík rukojeti a poté ji jemně otočte ve směru hodinových ručiček (viz: „Nasazení a sejmutí hlavičky kartáčku“).
- Navlhčete hlavu vodou a naneste přiměřené množství zubní pasty.
- Přiložte hlavu k zubům pod úhlem 45° k linii dásně.
- Stiskněte tlačítko On/Off. Hlavice kartáčku na zuby svítí bíle. Bílá LED svítí po dobu 30 sekund.
- Poté stiskněte tlačítko On/Off na vteřinu. Světla na hlavici se rozsvítí. Můžete změnit barvu světla (bílé nebo barevné) lisováním tlačítka.
- Začněte si čistit zuby. Používejte šetrné tahy při čištění zubů a dásní; používejte jemné zemetací pohyby. Ujistěte se, že štětiny na hlavici dosahují i do mezizubních prostor a masírujte dásně.

• Nezapomeňte důkladně vyčistit vnější, vnitřní a žvýkací povrchy.

• Časovač používá pulzní vibrace každých 30 sekund na připomenutí, že máte jít dál do dalšího kvadrantu úst.

• Nevývíjejte příliš velký tlak na zuby nebo nesetrvávejte kartáčkem v jedné oblasti úst po dlouhou dobu.


• Kartáček vypne po 2 minutách práce, tedy po čase doporučeném zubními lékaři.

• Po čištění zubů opláchněte hlavici kartáčku vodou a nechte uschnout.

• Abyste zabránili stříkání zubní pasty, vždy zapínejte zubní kartáček až poté, co jste jej umístili proti zubům a z úst ho vyjměte až po vyčištění zubů.

• Kartáček můžete kdykoli zastavit stisknutím tlačítka On/Off.

MONTÁŽ A DEMONTÁŽ HLAVICE

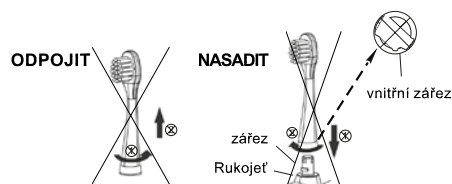

• **Montáž hlavičky:** Nasadte hlavici na čep držáku rukojeti. Jemně ji otočte ve směru hodinových ručiček. Ujistěte se, že zářez na přídržném čepu zapadá do odpovídající drážky uvnitř vyměnitelné hlavy.

• **Vyjmutí hlavičky:** Otočte hlavici proti směru hodinových ručiček. Vytáhněte hlavici směrem nahoru.


Doporučená frekvence výměny hlavičky - každé 3 měsíce.

VÝMĚNA BATERIE

• Na zadní straně kartáčku otočte kryt baterie ve směru hodinových ručiček ①, takže indikátor linky je zarovnan s levým koncem šipky. Poté zatáhněte za kryt dolů ②.

• Vložte novou AAA baterii dbejte na správnou polaritu.

• Nasadte víko ③ tak, aby čára indikátoru byla zarovnaná s levým koncem šipky. Pak to otočte proti směru hodinových ručiček tak, aby čára indikátoru byla zarovnaná s tečkou ④.

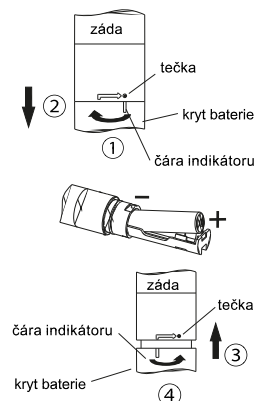

- Po vyčištění zubů odstraňte hlavici z rukojeti a opláchněte obě části vodou.
- Zatřeste hlavou, abyste se všech zbavili zbytkové vody.
- Použijte čistý, mírně navlhčený hadřík k vyčištění celého povrchu rukojeti. Rukojeť otřete do sucha.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Kartáček na zuby se nezapne.	Vyměňte baterii. Pokud se kartáček stále neotáčí ani po výměně baterie, kontaktujte zákaznický servis.
Kmity kartáčku jsou slabší.	Vyměňte baterii nebo hlavici. Kmity mohou být slabší pokud příliš tlačíte na hlavici kartáčku. Vyměňte baterii.
Baterie je rychle vybitá.	Vyměňte baterii. Pokud má kartáček stále krátkou výdrž baterie i po výměně nové, kontaktujte zákaznický servis.

SPECIFIKACE

NÁZEV	Feelo Kids Sonic Toothbrush
Materiál	DuPont Nylon/ABS/TPE
Zdroj energie	1 AAA baterie
Výdrž baterie	Až 150 dní
Frekvence kmitů čištění	24 000 kmitů za minutu
Voděodolnost třída	IPX7
Rozměry	188 x 19 x 19 mm
Standard kvality	GB4706.59-2008

VAROVÁNÍ

- Tento výrobek není hračka. Děti a osoby neschopné obsluhovat by měl používat pouze samotný produkt pod dozorem dospělé osoby
- Nerozebírejte ani se o to nepokoušejte opravit výrobek svépomocí. Pokud vaše dítě nedávno prodělalo operaci v dutině ústní, prosím před použitím se poradte se svým lékařem.
- Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie.
- Před použitím vložte baterii pozor na správnou polaritu. Nabíjejte pouze baterie, které jsou určené k nabíjení. Dobíjecí baterie by měla být vyjmuty před nabíjením.
- Zubní kartáček by měl být používán jen k čištění zubů a čištění dásní a jazyka. Zubní kartáček se nesmí používat pro jakékoli jiné účely.
- Neponořujte výrobek do vody.
- Nevystavujte výrobek vysokým teplotám pod bodem mrazu nebo slunečnímu záření po dlouhou dobu.
- Netlačte na zubní kartáček tvrdě proti zubům a dásním

Zubní kartáček Feelo má záruku 2 roky od data nákupu. Záruka se vztahuje na poškození související s výrobní vadou nebo nesprávné provedení produktu. Uschovejte si doklad od nákupu po dobu trvání záruční doby. V rámci záruční doby může kupující uplatnit reklamaci v místě nákupu pouze pokud byl výrobek používán správně pro zamýšlený účel.

Záruka se nevztahuje na:

1. Poškození povrchu v důsledku běžného použití: Jakékoli škrábance nebo oděrky na povrchu rukojeti je považováno za poškození povrchu vyplývající z běžného používání a proto nejsou pokryty zárukou. Záruka platí pro komponenty, které ovlivňují fungování zubního kartáčku.

2. Škody způsobené:

- Náhodný pád nebo náraz, nesprávné použití, zneužití nebo komerční využití, nedbalost nebo úpravou spotřebiče.
- Nesprávná údržba, nedostatečná péče o produkt.
- Opravy nebo pokusy o opravu servisem, který není autorizovaný Feelo. Jakékoli pokusy o otevření nebo demontáž spotřebiče, jeho části nebo příslušenství způsobí neplatnost záruky. Nároky na záruku musí být doloženy důkazem. Je třeba uplatnit nárok v záruční době.

SHOP DENT
WOJCIECH MADEJ
ul. Dziupli 12, 02-454
Warsaw, Poland
Made in P.R.C.

Model: SG-977
Battery: only AAA battery



RoHS
Compliant