

## Důležité bezpečnostní tipy

Toto zařízení se doporučuje používat dětem od 6 let. Při prvním použití se doporučuje, aby rodiče na děti dohlíželi a vedli je pro rychlejší seznámení s přístrojem. Při prvním použití se mohou objevit pocity stimulace nebo brnění. Nemějte obavy, protože se jedná o normální jev, který postupně vymizí. Je normální, pokud je hlavní tělo zařízení při nabíjení mírně teplé. Pokud se zařízení zahřeje na vysokou teplotu, okamžitě vypněte napájení a obraťte se na paprdejší středisko. Zařízení lze používat pouze s vybranými náhradními hlavami kartáčku. Společnost Oclean nenese ŽÁDNÉ náklady způsobené použitím neoficiálních nebo neověřených hlav kartáčku. Zařízení lze používat pouze k čištění zubů, dásní a jazyka. Nepoužívejte jej jiným způsobem. Toto zařízení je určeno pouze pro osobní čištění a nedoporučuje se pro lékařské účely a pro použití více uživateli. Zařízení lze používat pouze v interiéru. Zařízení NEVYSTAVUJTE po delší dobu slunečním paprskům. Doporučuje se umístit do suchých a dobře větraných prostor s normální teplotou. Odpojte napájení, pokud přístroj nechcete nabíjet nebo před čištěním. Sifovou zátuvku čistěte v pravidelných intervalech, abyste zabránili hromadění prachu a nečistot a zabránili snížení účinku nabíjení. Toto zařízení splňuje bezpečnostní normy pro elektromagnetická zařízení. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se kardiostimulátorů nebo jiných implantovaných zařízení se před použitím poraďte s lékařem nebo poskytovatelem výše uvedeného prostředku. Nabíjecí kabel nepochiňte do vody ani jiné kapaliny. Nepřipojujte ke zdroji napájení, pokud je v zástrčce nabíjecího kabelu kapalina. Zařízení obsahuje lithiovou baterii, takže by mělo být skladováno mimo dosah ohně a zdroje tepla. Nenabíjejte, nepřeprogramujte, nepoužívejte a neukládejte v místech s vysokou teplotou. S přístrojem nebouchujte ani jej neupouštějte na zem. Pokud je zařízení poškozeno v důsledku kolize nebo pádu, přestaňte jej používat. Zařízení sami neopravujte, nerozebírejte ani neopravujte. Před výměnou baterie musí být zařízení vypnuté. Po výměně zlikvidujte baterii bezpečným způsobem. Toto zařízení by mělo být při nabíjení chráněno před silnými elektromagnetickými poli (např. indukčními varčiči). Děti si nesmí se zařízením hrát, čistit jej, ani provádět jeho údržbu. Před připojením k napájecímu zdroji zkontrolujte, zda napětí uvedené na zařízení odpovídá místnímu napájecímu napětí. Nabíjecí kabel by se neměl používat venku na slunci. Zařízení nepoužívejte, když se koupete nebo sprchujete. Hlavu kartáčku nesdílejte s jinými osobami. Nepokládejte k zařízení kovové předměty, pokud je zapnuté. Varování: Zařízení není kvůli malým dílům vhodné pro děti do 3 let. Veškeré obalové materiály, jako jsou krabice, vnitřní plastové krabíčky, nálepky, vnější fólie atd., nejsou součástí zařízení. Děti si s nimi nesmí hrát. Z důvodu bezpečnosti vašeho dítěte výše uvedené obalové materiály zlikvidujte. Varování: Zařízení obsahuje malé části, jako je například ochranný kryt hlavy kartáčku. Zabraňte dětem v jejich spolnutí. Při prvním použití nebo výměně hlavy kartáčku za novou zlikvidujte ochranný kryt hlavy kartáčku. Zařízení nepoužívejte při teplotách vyšších, než je doporučená provozní teplota 5 – 40 °C. Kartáček ani žádnou část hlavy kartáčku neoplachujte vodou o teplotě vyšší než 60 °C.

## Opatrnosti je třeba u uživatelů s citlivými ústy a následujícími obtížemi

Pokud jste v nedávné době podstoupili periodontální operaci nebo podstupujete ošetření, nebo vaše zubní protézy nejsou bezpečně usazeny, nebo vaše dásně nadále silně krvácejí, nebo jsou vaše ústa citlivá a křehká, poraďte se před použitím zařízení s odborným zubním lékařem. Zařízení není vhodné pro osoby se zdravotním postižením, duševně nemocné nebo pro osoby, které nemají odpovídající zkušenosti a znalosti. Pokud je nepoužívají pod dohledem svých opatrovníků.

## Pokyny pro použití



Dotkněte se tlačítka zapnuto/vypnuto a kartáček začne pracovat.



Dlouhým stisknutím můžete přepínat režimy čištění. Existují dva režimy: měkký a standardní.




Jestliže je úroveň nabití nízká, bliká červená kontrolka.

Výzva při nízké úrovni nabití baterie: Pokud červená kontrolka bliká, znamená to, že musí být baterie nabita, aby bylo zajištěno normální používání. Červená kontrolka bude blikat, když je úroveň nabití nižší než 20 %. Jak nabíjet: Opatrně umístěte zařízení na nabíjecí základnu, která byla připojena ke zdroji napájení. Při nabíjení se rozsvítí bílá kontrolka a po dokončení nabíjení, které obvykle trvá 3 hodin, bude kontrolka svítit trvale. Důležité upozornění: Nabíječku doporučujeme napájet pouze v případě potřeby. Pokud nabíječku nepotřebujete, odpojte ji. Ponechání zubního kartáčku na nabíjecí základně pod napětím po delší dobu může vést k předčasnému snížení kapacity zabudované baterie. Instalace náhradní hlavy kartáčku: Kvůli opotřebení je třeba hlavu kartáčku z hygienických důvodů každé 2-3 měsíce vyměnit. Hlavu kartáčku vytáhněte nebo ji vložte do oslačeného hřídele silou ve směru „rovně nahoru“ a „rovně dolů“ a neotáčejte ji doleva nebo doprava. Po instalaci bude mezi hlavou kartáčku a tělem hlavy kartáčku mezera, aby měla místo pro pohyb. Důležitá poznámka pro instalaci hlavy kartáčku: Vzhledem k tomu, že výměna hlavy kartáčku vyžaduje značnou sílu, doporučuje se, aby výměnu provedli rodiče, aby se zabránilo možnému zranění dítěte způsobenému jejich nesprávnou manipulační nebo silou.

## Doporučená metoda čištění zubů

Doba čištění: Zubní lékaři (stomatologové) doporučují, aby použití tradičního ručního zubního kartáčku trvalo až 2 minuty, proto jsme navrhli dobu u čištění 120 sekund. Síla použití při čištění: Hlavu zubního kartáčku jemně přiložte k povrchu zubu bez použití nadměrné síly.

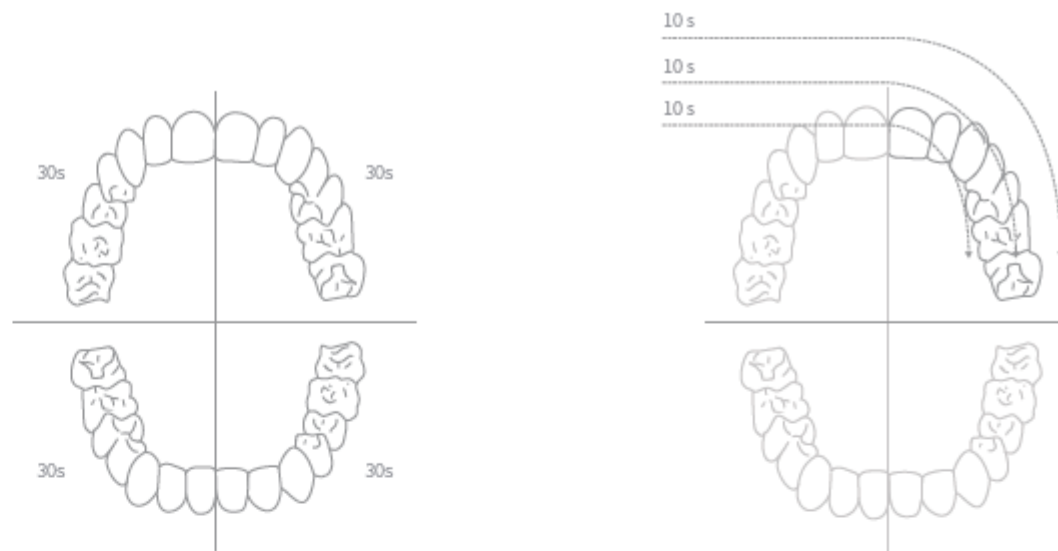

## Každodenní čištění a údržba



Čištění hlav kartáčku

Po každém použití umyjte hlavu a kartáček a nechte jej oschnout. Netlačte za kartáček, jinak se zdeformuje a upadne.



Čištění těla

Povrch rukojeti omyjte čistou vodou, otřete jej měkkým hadříkem a nechte oschnout. Netlačte na pryžové těsnění na kovové ose ostrými předměty, aby nedošlo k jeho poškození.



Výměna hlavy kartáčku

Zubní lékaři doporučují měnit hlavu každé 2-3 měsíce, aby byla udržena optimální kvalita a účinek čištění.



Čištění nabíječky

Měkkým hadříkem otřete skvrny na nabíječce. Před čištěním nabíječky se ujistěte, že jste vytáhli zástrčku napájení ze zásuvky. Povrch nabíječky otřete vlhkým hadříkem. Nepoužívejte drhivo, než oschne.

## Specifikace

Název produktu	Zubní kartáček pro děti Oclean Kids	Kapacita baterie	800 mAh (**)	Obsah balení	Rukojeť zubního kartáčku * 1, hlava kartáčku pro děti * 2, nabíječka z základny * 1, návod * 1
Typ	Oclean Air2	Napájení	5V = 0.5A	Výdrž baterie	30 dní (*)
Maximální moment síly	180gf.cm	Doba nabíjení	Přibližně 3 hodin	Norma	GB 39869-2020
Jmenovitý výkon	1.8W	Způsob nabíjení	Indukční nabíjecí základna		

Naše zařízení neustále vylepšujeme. Upozorňujeme, že pokud se obsah příručky mírně liší od skutečných funkcí, specifikací nebo konstrukce zařízení, nebude na to upozorněno. Jakékoli nároky na základě údajů, schémat nebo textových popisů v této příručce nebudou akceptovány. Obrázky v této příručce slouží pouze pro orientaci uživatele. Prohlédněte si nejprve skutečné zařízení. Příručka obsahuje důležité informace. Před použitím si jej pečlivě přečtěte a uschovejte je.

Pro další informace si můžete zavolat, kliknout na náš web: [www.oclean.com](http://www.oclean.com)