



Philips Sonicare AirFloss
Ultra
AirFloss Ultra – přístroj
mezizubní hygieny

S 1 tryskou

AirFloss Ultra



HX8331/02

Zdravější dásně za 2 týdny, zaručeno*

Pro ty, kdo nepoužívají pravidelně zubní nit

Přístroj Philips Sonicare AirFloss Ultra je pro ty, kdo nepoužívají pravidelně zubní nit, nejjednodušším způsobem efektivního čištění mezi zuby. AirFloss Ultra lze používat s ústní či obyčejnou vodou a klinické studie prokázaly, že zdraví dásní prospívá stejně jako zubní nit.**

Zlepšuje zdraví zubů a dásní

- Odstraňuje až 99,9 % zubního plaku***
- Klinické studie dokázaly stejnou efektivitu pro dásně jako u zubní niti**
- Přispívá ke snížení výskytu zubního kazu mezi zuby

Jedinečná technologie

- Směs vzduchu a mikro-kapiček vody rozruší a odstraní plak z mezizubního prostoru
- Vysoce výkonná tryska
- Vyberte jeden, dvojí nebo trojí prostřík

Nejjednodušší cesta k efektivnímu čištění mezizubních prostor

- Jednoduchý způsob, jak získat zdravý návyk
- 60 vteřin stačí: namířit, stisknout, hotovo!
- Svěžest a čistota s ústní vodou

PHILIPS
sonicare


Přednosti

Odstraňuje až 99,9 % zubního plaku




Odstraňuje až 99,9 % zubního plaku z čišťených míst.***

Technologie mikrokapiček

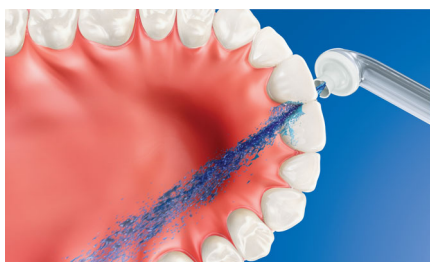


Klinicky prokázané výsledky jsou podloženy naší jedinečnou technologií kombinující směs mikrokapiček vody a vzduchu k účinnému a zároveň jemnému čištění mezi zuby a podél linie dásní.

Snadno získáte zdravý návyk

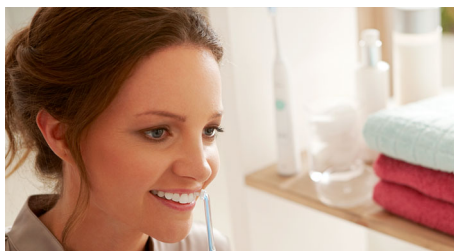

Čištění mezizubních prostor je velmi důležité pro celkové zdraví ústní dutiny. AirFloss představuje snadný způsob čištění mezi zuby a pomáhá vybudovat zdravé návyky.

Pro zdravější dásně

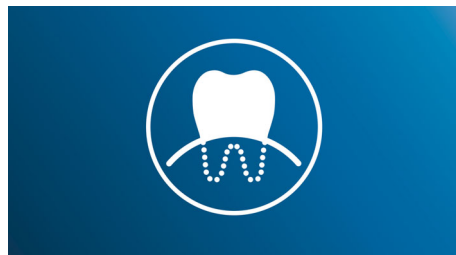

Philips Sonicare AirFloss Ultra podle klinických studií zlepšuje zdraví dásní stejně jako zubní nit.** Stav dásnílepší za pouhé dva týdny.

Vyčistí za pouhých 60 vteřin



S přístrojem AirFloss Ultra vám čištění mezizubních prostor zabere méně než 60 vteřin denně. Stačí si zvolit frekvenci dávky (jednoduchou, dvojitou nebo trojitou) a čistit přidržením aktivačního tlačítka pomocí nepřetržitých automatických dávek nebo stisknutím a uvolněním v manuálním režimu.

Svěžest a čistota s ústní vodou



Používejte s ústní vodou a získejte tak pocit dokonalé svěžesti bez bakterií.

Přispívá ke snížení výskytu zubního kazu




Jemným odstraňováním plaku, který čištění neodstránilo, pomáhá přístroj Philips Sonicare AirFloss Ultra předcházet tvorbě kazů mezi zuby.

Vysoce výkonná tryska



Nová vysoce výkonná tryska AirFloss Ultra zesiluje účinek naší technologie kombinující směs vzduchu a mikrokapiček vody a díky tomu je účinnější než kdykoli předtím.

Volitelné nastavení počtu prostřiků

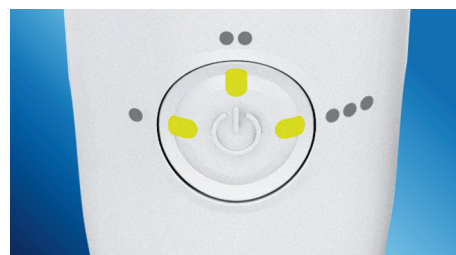

Směs vzduchu a mikrokapiček vody přístroje AirFloss Ultra můžete upravit podle svých potřeb na jednoduchou, dvojitou nebo trojitou dávku, která se spustí aktivačním tlačítkem.

Specifikace

Balení obsahuje

- Tělo AirFloss Ultra: 1
- Trysky: 1
- Nabíječka: 1

Výkon čištění

- Klinicky prokázané výsledky: Stejně účinný jako zubní nit, pro zlepšení zdraví dásní, pro snížení krvácení dásní, pro odstranění zubního plaku
- Výkon: Odstraňuje až 99,9 % plaku
- Přínos pro zdraví: Mezizubní hygiena vám zabere pouhých 60 vteřin, Zlepšuje zdraví dásní během 2 týdnů
- Přizpůsobitelné nastavení: Na výběr manuální či automatické prostríkování, Vyberte jeden, dvojí nebo trojí prostríh
- Pro nejlepší výsledky: Trysku měňte každých 6 měsíců

Snadné použití

- Tělo AirFloss Ultra: Tenký ergonomický design
- Indikátor baterie: Kontrolky LED na těle ukazují úroveň nabití
- Výdrž baterie: Až 2 týdny
- Systém trysky: Snadné nasazení a sejmutí

Technické údaje

- Baterie: Nabíjecí
- Typ baterie: Lithium-iontová
- Doba nabíjení: Úplné nabití za 24 hodin

Spotřeba

- Napětí: Nabíječka pro více napětí

Servis

- Záruka: 2letá omezená záruka

Design a provedení

- Barva: Bílá s růžovým nádechem



Datum vydání 2017-08-04

Verze: 6.0.1

EAN: 08 71010 37148 35

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

** při používání v kombinaci s manuálním kartáčkem a antibakteriální ústní vodou u pacientů s lehkým až středním zánětem dásní; AirFloss Ultra pomáhá těm, kdo pravidelně nepoužívají zubní nit, vypěstovat denní návyk čištění mezizubních prostor. Blíže informace najdete v sekci Otázky a odpovědi na kartě Podpora.
*** v laboratorní studii, výsledky v praxi se mohou lišit.
* nebo vám vrátíme peníze