

Použití zubních kartáčků IONICKISS je bezpečné pro všechny.  
Nicméně, pokud používáte kardiotimulátor či podobné zařízení, prosíme, konzultujte použití kartáčku se svým lékařem.



Klinicky prokázáno - IONICKISS Original odstraňuje zubní plak až o 48% efektivněji než ostatní manuální zubní kartáčky.



Výmenná hlavice - pro dosažení co nejlepších výsledků měňte výmennou hlavici každé dva až tři měsíce.



3V baterie - lithiová baterie zabudovaná do těla kartáčku vydrží až jeden rok.



Vyrobeno v Japonsku - synonymum pro kvalitu a inovace. Kartáček IONICKISS Original je oficiálně certifikovaný u Tokijského technologického institutu.



Ionizační technologie - negativně nabité ionty narušují vazbu mezi zuby a zubním plakem.




Není potřeba žádná zubní pasta - první zubní kartáček, který lze úspěšně používat i bez zubní pasty.

## Části zubního kartáčku

- 1 Výmenná hlavice
- 2 Kovová tyčinka sloužící k přenosu iontů.
- 3 Indikátor stavu baterie.
- 4 Hermeticky zabudovaná 3V baterie překrytá kovovým páskem.
- 5 Kovový pásek
- 6 Tlačítko pro kontrolu stavu baterie

**IONICKISS™**  
アイオニック

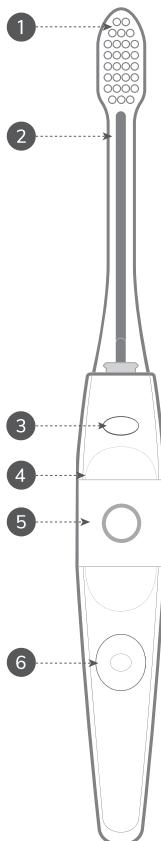

### NÁZEV: Manuální zubní kartáček IONICKISS ORIGINAL

### POPSÍ:

Manuální ionizační kartáček se zabudovanou baterií a jednou výměnnou hlavicí.

### DATUM EXPIRACE:

neomezené

### UPOZORNĚNÍ:

Uchovávejte mimo dosah dětí mladších tří let.

### VÝROBCE:

IONIC CORPORATION

914-1 Nazukari, Nagareyama,  
Chiba, 270-0145 Japan


### DISTRIBUTOR:

Ortus Health s.r.o.,  
IČ 08754039, Česká republika



ionic  
technology

## Jak to funguje?

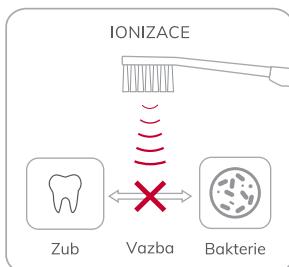

### Jak IONICKISS odstraňuje zubní plak?

Zubní plak je přichycen k zubům za pomocí pozitivních iontů ze slin. Negativní ionty ze zubního kartáčku IONICKISS účinně rozrušují tuto vazbu mezi zuby a plakem a umožňují tak snadné odstranění plaku pohybem kartáčku.



Ionizační technologie

48%

Efektivněji



Vyrobeno v Japonsku

## Jak se používá?

Kartáček IONICKISS se používá velice jednoduše.

Při držení kartáčku se dotýkejte navlhleným prstem nebo dlaní kovového pásku.

A vyčistěte si pořádně zuby.



### Jak si nejlépe vyčistit zuby?

Pokaždé opakujte to samé. Zuby čistěte nejprve zvenku a po té z vnitřní strany. Začněte spodní čelistí a po té se přesuňte na tu horní.

Na vnější straně dásní přiložte štětiny zubního kartáčku proti zubům v mírném úhlu k linii dásní a čistěte jemnými krátkými krouživými pohyby. U každého zuba provedte 5-10 opakování.

Pro vnitřní části používejte stejnou techniku a pohybujte se postupně z jedné stoličky na druhou.


Pokud jde o žvýkací plošky, začněte čistit na jedné straně stoliček a pomalu se pohybujte krátkými tahy tam a zpět směrem ke druhé straně stoliček.

Celý proces by měl trvat přibližně 3 až 6 minut.

Není třeba tlačit. Čistěte zuby jemně.

Je klinicky prokázáno, že IONICKISS Original odstraňuje zubní plak až o 48% efektivněji než jiné manuální kartáčky a to i bez použití zubní pasty.


## Jak vyměnit náhradní hlavici?

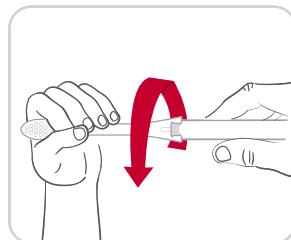

Džte kartáček pevně za rukojet.

Otočte výmennou hlavicí o 90 stupňů a zatáhněte.


### Jak zkontrolovat stav baterie?

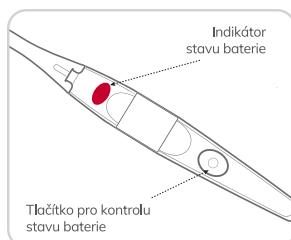

Pokud chcete zkontrolovat stav baterie, zmáčkněte kontrolní tlačítko.

Cervené světlo indikuje, že je kartáček připraven k použití.

Litiová baterie je zabudovaná do těla kartáčku a vydrží cca jeden rok.

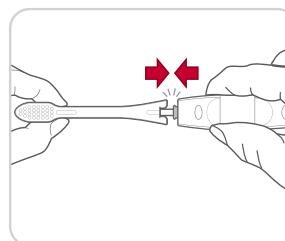

Nasadte výmennou hlavicí na kovovou tyčinku a zavakněte ji do kartáčku.

\*Existují různé typy výmenných hlavic IONICKISS. Podrobnosti naleznete na [ionickiss.cz](http://ionickiss.cz)